

MESURE DE LA GLYCÉMIE




- 1 Retirez si nécessaire la puce blanche. Insérez une puce noire et laissez-la dans le lecteur. **Une fois pour toutes !**




- 2 Insérez la bandelette après avoir vérifié la date de péremption inscrite sur le flacon. Le lecteur s'allume automatiquement.



- 3  Le symbole d'une goutte clignote à l'écran. **Prélevez une petite goutte de sang.**




- 4 Appliquez la goutte de sang à l'extrémité de la bandelette.

 Lorsque la quantité de sang est suffisante, vous entendrez un « bip », un sablier apparaît à l'écran.



Résultat en 5 secondes

- 5 Différents marquages existent afin d'identifier votre glycémie : Appuyez et relâchez la touche  pour passer d'un marquage de résultat à un autre.



- Marquage avant repas



- Marquage avant repas avec rappel après repas



- Marquage après repas



- Marquage général (autres événements particuliers)

Retirez la bandelette, le lecteur s'éteint automatiquement après quelques secondes.

PRÉLÈVEMENT CAPILLAIRE

ACCU-CHEK® FastClix

1^{er}
autopiqueur
qui arme et pique
en même temps

1 Armez et piquez en 1 clic


2 Changez de lancette en actionnant le levier




Nombre de lancettes neuves restantes

11 profondeurs de piqure

INSERTION D'UN BARILLET

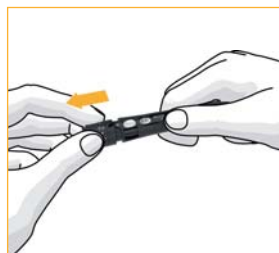

Retirez l'embout.

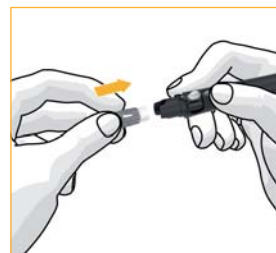

Insérez un barillet, puis remplacez l'embout.

www.diabeteetados.fr
www.diabeteaufeminin.fr



Assistance utilisateur
contactez-nous
0 800 27 26 93
APPEL GRATUIT DÉFINI UN POSTE 100%

ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK PERFORMA NANO et FASTCLIX sont des marques du Groupe Roche. © 2013 Roche Diagnostics France

4769 - PRO/G - 02/2013 Réf. 00056006393 PA- 057-13

ACCU-CHEK® Performa Nano
Quand la performance rencontre le design.

Mode d'emploi simplifié

www.accu-check.fr

ACCU-CHEK®

PREMIÈRE UTILISATION



- 1 Insérez une puce noire et laissez-la dans le lecteur. **Une fois pour toutes !**



- 2 Allumez le lecteur en **appuyant sur** ①.



- 3 Le lecteur est préréglé. **Appuyer 5 fois** sur ① pour valider les paramètres (heure, minutes, jour, mois, année). *Il est possible de les modifier en appuyant sur ◀ ou ▶.*



Lorsque la bandelette clignotante apparaît à l'écran vous pouvez :

- Eteindre le lecteur en appuyant sur ① *ou bien*
- Insérer une bandelette dans le lecteur et mesurer votre glycémie.

RÉGLAGES : POUR ALLER PLUS LOIN

Paramètres à régler :

heure, minutes, jour, mois, année, signal sonore, sonneries de rappel (Rappel des glycémies post prandiales (1h ou 2h après le repas), jusqu'à 4 sonneries programmables), **alerte de risque d'hypoglycémie** (50 à 90 mg/dl).



- 1 Pour accéder au mode réglage, appuyez sur la touche ①. Le lecteur se met en marche.



- 2 Appuyez longuement sur la touche ① jusqu'à ce que le menu réglage « set-up » s'affiche. Les paramètres « **heure** » et « **date** » apparaissent.



- 3 Pour modifier la valeur d'un paramètre, appuyez sur ◀ ou ▶. Pour passer au paramètre suivant, appuyer sur ①.

Vous pouvez **quitter le menu réglage** à tout moment en appuyant longuement sur la touche ①. Le symbole de la bandelette clignote .

Vous pouvez alors insérer une bandelette pour mesurer une glycémie, ou bien éteindre le lecteur en appuyant sur la touche ①.

MÉMOIRES ET MOYENNES

1 MÉMOIRES

Lecteur éteint, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour accéder à la **mémoire**.

Le résultat le plus récent apparaît.

Appuyez sur la touche ◀ pour afficher les **résultats précédents** puis sur la touche ▶ pour revenir aux résultats les plus récents.

Appuyez sur la touche ① pour éteindre le lecteur.



2 MOYENNES

Lecteur éteint, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour accéder à la **mémoire**.

Le résultat le plus récent apparaît.


Appuyez sur la touche ▶ pour avoir les **moyennes** sur les 7, puis sur les 14, 30 ou 90 derniers jours.

En continuant d'appuyer sur ▶, vous avez ensuite : les moyennes **pré-prandiales** sur 7, 14, 30 et 90 jours puis les moyennes **post-prandiales** sur 7, 14, 30 ou 90 jours. Appuyez sur la touche ① pour éteindre le lecteur.



CONNEXION INFORMATIQUE

Lecteur éteint, appuyez **simultanément** sur les touches ◀ et ▶ jusqu'à ce que le voyant ci-dessous apparaisse en clignotant :

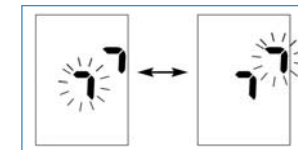

Vous pouvez maintenant transférer par infrarouge vos données à un ordinateur ou à un ordinateur de poche (requiert un logiciel de la gamme Accu-Chek).